


販売名：ZedView セッドビュー
医療機器認証番号：227AABZX00075000

ZedView 2.5D

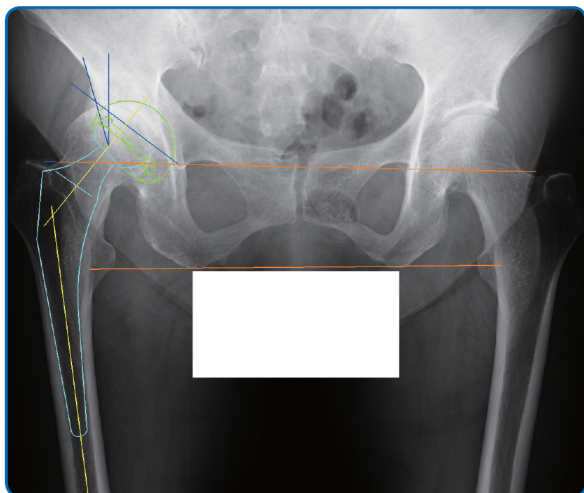


ZedView 2.5D はレントゲン画像に3次元モデルを重ねて表示するソフトウェアであり、人工股関節置換術を支援します。

レントゲン画像データ上にインプラントを表示させ、サイズや位置のプランニングが可能です。レントゲン画像は平面ですが、インプラントは3次的に動かすことができます。

Hipではインプラントどうしのインピンジのシミュレーションが可能です。

KneeはCoronal面とSagittal面の両方でプランニングすることができます。

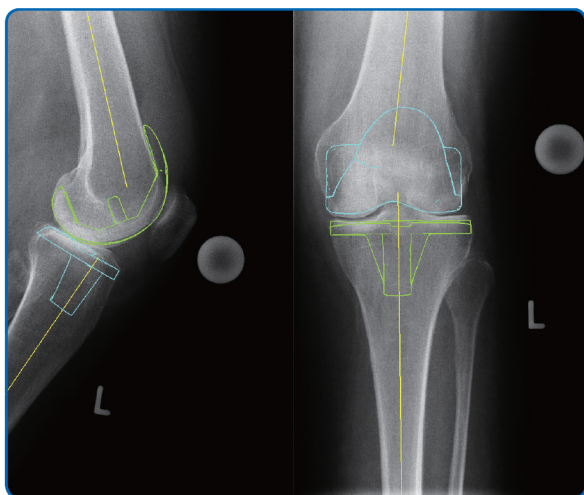

特徴と機能

- C R画像上に2次元／3次元でインプラントデータの表示可能
- 少ない操作手数と、簡単に直感的な操作方法
- 整復シミュレーション
- Hipでのカップ対ステムのROMシミュレーション機能
- 有用なパラメータ
 - C E角、Sharp角、頸体角…etc.
 - FTA, ML DFA, MMPTA…etc.

