





# ZedPlanning



## ①CT撮影

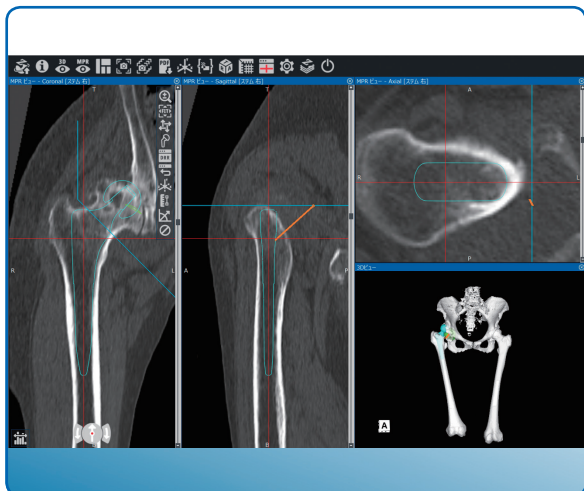


## ②DICOMファイルを送信

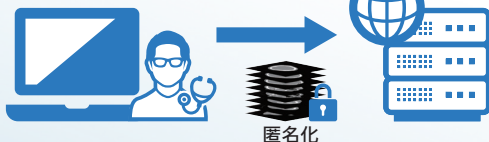

## ③LEXIが術前計画を作成



## ④プランニングファイルをダウンロード

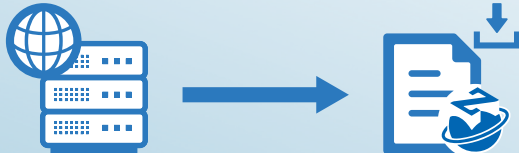

## ⑤3Dテンプレートを確認



ZedPlanning はインターネットを介した術前計画及び術後評価提供サービスで、1症例毎に利用することができます。

### ▶術前計画

3次元テンプレートを使用したTHAやTKA、TSAならびにRSAの術前計画案をレキシーが用意いたします。

ドクターは、その案を参考にすることで、術前計画作成の時間を短縮することができます。

### ▶術後評価

術前計画及び術後CTをもとに作成した術後評価データをレキシーが用意いたします。

ドクターは術後評価データからインプラント設置位置やパラメータ等の術前・術後間の差異を参照することで、手術の精度を評価することができます。

## 特徴

- 術前計画案はレキシーが作成するため、時間の節約が可能（参照点設定、3次元モデル、基本的なインプラント設置 等）
- 術後評価データはレキシーが作成するため、時間の節約が可能（イメージマッチング、術後インプラント設置位置再現）
- 1患者1症例からご利用可能
- 初期費用や毎年の更新費用は不要で、症例毎の費用のみでご利用可能
- 広範なインプラントラインナップ
- 自由にインプラントの設置位置やサイズの編集が可能
- インプラント情報やパラメータを含んだPDFレポート形式での出力が可能のため、情報共有が容易